


Therapie-Table

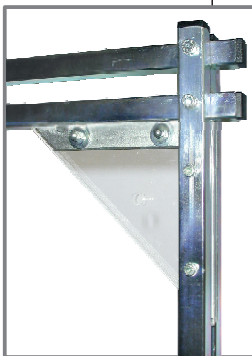

Therapie-Table

Die Antwort auf die Frage:

“Wo finde ich einen Tisch für KlientInnen im Rollstuhl, dessen Tischplatten auswechselbar sind, der höhenverstellbar ist und sich handlich und praktisch bedienen lässt um neue kommunikative Erfahrungs- und Lernräume zu erschliessen.

Einen rollbaren Tisch, mit dem sich KlientIn und TherapeutIn wohlfühlen.”

karrer|works

Büchelgässli 2

CH - 9125 Brunnadern

fon: +41 (0) 71 374 17 44

mobil: +41 (0) 78 660 52 60

www.karrer-works.ch


info@karrer-works.ch

märz-18 | 3-1

Auflegeplatten

Material:
HPL-Vollkern
6 mm dick, beid-
seitig benutzbar,
wasserfest
Grösse: 900 x 600 mm,

Im Dreierset erhältlich,
Farben können
aus einer grossen
Farbpalette
ausgewählt werden.

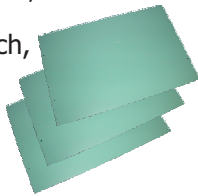


Einlegegefässe


Die Platten
werden für den
Gebrauch diverser
Einlegegefässe
mit Lochungen
versehen

Die Auswahl,
Farbe, Grösse,
Kombination und
Lage der Gefässe
können selber
bestimmt werden.

Beispiele
von verschiedenen
Platten, die mit diversen
runden, quadratischen oder
rechteckigen; mit transparenten
grauen oder farbigen Becken
ausgerüstet sind. Die Platten
lassen sich damit für jeden
spezifischen Verwendungszweck
auf jedes Bedürfnis ausrichten.

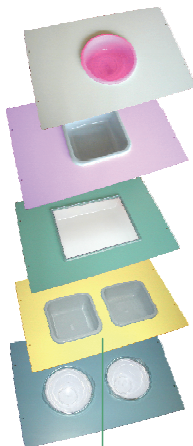

Stabilität
und Design

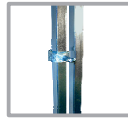

Funktionell
zum
Befestigen



Schnell
verstellen und
einrichten




Funktionell
zum
Aufhängen




Rollen
zum
Feststellen




Skala
für Höhen-
Einstellung

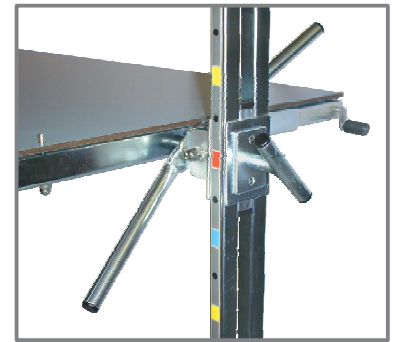


Funktion + Gebrauch

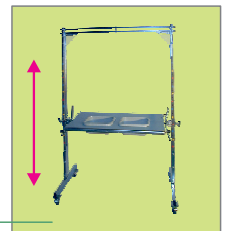

Das Tischgestell ist höhenver-
stellbar von 600 bis 1'500 mm Höhe,
und rundum um 360° drehbar.

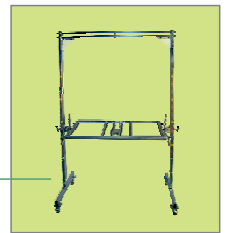


Auf das Tischgestell können Platten
aufgelegt werden, um so
verschiedene Tischfunktionen zu
erreichen.

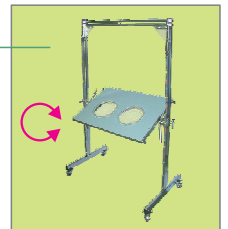

Die Schrägstellung ermöglicht
verschiedenstes therapeutisches
Arbeiten. Die Platten sind mit
Ausschnitten versehen, in die
diverse Einlegegefässe eingesetzt
werden können. Das Tischgestell
kann mit einer entsprechenden
Platte versehen auch als ein
Zeichenbrett im Stehen benutzt
werden.



Das Tischgestell kann seitlich in der
Höhe verschoben werden. Dadurch
ist auch eine seitliche
Schrägstellung bis ca. 15° möglich,
und die Höhenverstellung des
ganzen Tischgestelles gelingt auch
einer Einzelperson.

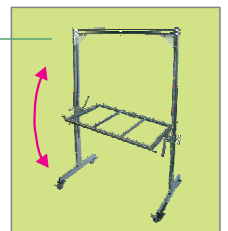

Je zwei Kurbeln bewegen die
Feststellwinkel im Tischgestell. So
lassen sich auf dem Gestell
platzierte Gegenstände und allenfalls
von oben eingeschobene
Einlegegefässe arretieren.

